

Clearblue™ PLUS

(색 변화 띠 포함)

- Clearblue™ Plus 는 생리 예정일부터 99% 이상의 정확도를 보입니다.
 - Clearblue™ Plus 무월경 기간 전 5일부터 사용할 수 있습니다.
- 테스트를 실시하기 전에 이 설명서를 꼼꼼히 읽어 보시기 바랍니다.

임신 테스트

제품명: 개인용체외진단검사시약 I

시작하기 전에

테스트를 할 때 시계를 사용하면 도움이 될 수 있습니다.

1 테스트하기

- 생리 예정일부터 테스트하는 경우, 하루 중 아무 때나 테스트를 해도 됩니다.
- 생리 예정일 전에 테스트하는 경우에는 하루의 첫 번째 소변을 사용하십시오.
- 테스트할 준비가 되면, 포일 포장지에서 테스트 스틱을 꺼내 파란색 뚜껑을 벗기십시오. 테스트 스틱을 즉시 사용하십시오.

소변에서 테스트

- 소변 줄기에서 직접 테스트할 수 있습니다. 또는 깨끗하고 건조한 용기에 소변 샘플을 채취하여 테스트할 수 있습니다.
- 색 변화 띠를 아래쪽으로 가게 잡고 소변 줄기에 대십시오. 또는 그림과 같이 채취된 소변 샘플에 5초간 담습니다.
- 색 변화 띠가 즉시 분홍색으로 변하며 소변이 흡수되고 있음을 표시합니다.



테스트기 띠를 최소 5초간 소변에 계속 담고 있어야 합니다.



테스트기 띠를 최소 5초간 소변에 계속 담고 있어야 합니다.

색 변화 띠가 분홍색으로 바뀌는 것이 보이는 즉시 5초를 세기 시작하십시오.

소변 줄기 또는 채취된 샘플

- 결과를 확인할 준비가 되고 파란색 선이 제어 창에 나타날 때까지 색 변화 띠가 아래쪽으로 가도록 계속 잡고 있거나 테스트 스틱을 평평한 곳에 두십시오.
- 뚜껑을 다시 닫아도 됩니다.

색 변화 띠가 분홍색으로 완전히 변하지 않을 경우 7번 질문을 참조하십시오.


2

3
분

3분을 기다립니다. 테스트기가 작동하면 파란색 선이 나타나기 시작할 것입니다.

3 결과 확인

- 결과 창에서 결과를 확인할 수 있습니다.
- 결과를 확인할 때 파란색 선이 제어 창에 있어야 합니다. 이 선이 표시되면 테스트기가 작동한 것입니다.
- '임신' 결과는 생리를 거른 날(생리가 예상되었으나 나오지 않은 다음 날)부터는 테스트 시 1분 만에 표시될 수 있습니다.
- '임신 아님' 결과를 확인하려 하거나 생리를 거르기 전에 테스트할 때는 3분간 충분히 기다려야 합니다(11번 질문 참조).
- 파란색 선이 10분 이내에 제어 창에 나타나면 테스트기가 작동한 것입니다(8번 질문 참조).

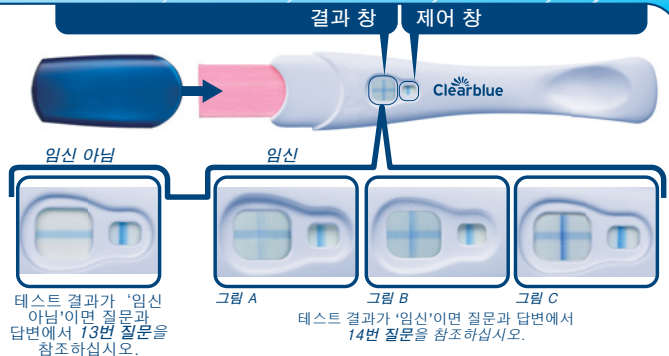

테스트 결과가 '임신 아님'이면 질문과 답변에서 13번 질문을 참조하십시오.

테스트 결과가 '임신'이면 질문과 답변에서 14번 질문을 참조하십시오.

플러스(+) 기호를 구성하는 선 중에서 한 개가 다른 것보다 색이 얇거나 짙은 것은 중요하지 않으며, 결과는 '임신'입니다.

중요! 테스트 후 10분 이내에 결과를 확인하십시오. 이 시간 이후 결과에서 일어나는 변화는 무시하십시오. 여전히 결과가 의심스러우면 자세한 내용을 9번 질문에서 참조하십시오.

질문과 답변 - 자주 묻는 질문에 대한 답변은 뒷면을 읽어 보십시오.

질문과 답변

- 1 Clearblue® Plus는 얼마나 정확합니까?**
Clearblue® Plus는 생리 예정일부터 테스트하는 경우, 검사실 테스트에서 99% 이상의 정확도를 나타냅니다.
- 2 Clearblue® Plus는 어떻게 작동합니까?**
임신한 여성의 몸에서는 임신 호르몬인 hCG(인간 융모성 성선 자극 호르몬)가 생성됩니다. 체내 hCG의 양은 임신 초기에 증가합니다. Clearblue® Plus(은)는 소변에 포함된 미량의 이 호르몬을 검출할 수 있습니다(이 테스트기의 감도: 25mIU/ml).
- 3 Clearblue® Plus로 언제 테스트할 수 있습니까?**
Clearblue® Plus는 무월경 기간 전 최대 5일(생리 예정일 전 4일)부터 사용할 수 있습니다. 생리 예정일 전에 테스트하는 경우 '임신 아님' 결과가 나왔다면 아직 임신할 수 있는 가능성이 있습니다. 초기 임신 샘플을 사용하여 Clearblue® Plus의 임상 진단에서 얻은 결과를 요약한 아래의 표를 참조하십시오.

| 조기 테스트 | |
|-------------|--------------------------------------|
| 생리 예정일 전 일수 | 임신한 여성의 샘플 중 '임신' 결과를 제공하는 샘플의 비율(%) |
| -1 | 98% |
| -2 | 97% |
| -3 | 88% |
| -4 | 56% |

- 4** 이른 아침 소변 샘플을 사용해야 합니까?
생리 예정일 전에 테스트한다면 하루 중 첫 번째 소변으로 테스트할 것을 권합니다. 그렇지 않으면 하루 중 언제든지 테스트할 수 있습니다. 테스트 전에 과도한 수분 섭취는 삼가하십시오.
- 5** 저의 다음 생리 예정일이 언제인지 확실하지 않습니다. 적절한 시점에 테스트하고 있다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?
생리 예정일이 언제인지 알아보려면 생리 기간의 첫째 날부터 다음 생리 기간 전일까지의 일수를 세서 평소 주기의 길이를 계산합니다.
• 주기가 불규칙한 경우 테스트 전 최근 몇 달간 가장 길었던 주기를 기준으로 해야 합니다.
• 생리 예정일을 전혀 모르겠다면 마지막 월경이 성관계를 가진 후 19일이 지나 테스트하는 것이 좋습니다.
• 테스트 결과가 '임신 아님'이지만 여전히 임신이 의심되는 경우, **13번 질문**을 참조하십시오.
- 6** 의약품이나 의학적 질환이 결과에 영향을 줄 수 있습니까?
• 테스트를 실시하기 전에 항상 귀하가 복용 중인 약물에 관한 제조사 지침을 읽으십시오.
• hCG를 함유한 배란 유도제는 잘못된 결과를 제공할 수 있습니다(그런 배란 유도제는 보통 주사로 투여되며, 투약 후 너무 일찍 테스트하면 거짓 '임신' 결과가 나올 수 있음).
• 다른 불임 요법(예: 클로미펜), 진통제 및 호르몬 피임약은 결과에 영향을 주지 않습니다.
• 최근에 호르몬 피임약의 사용을 중단했거나 클로미펜 같은 불임 요법을 사용했고 있다면 생리 주기가 불규칙하여 너무 일찍 테스트하게 될 수 있습니다.
• 최근에 임신한 적이 있다면(만삭 출산하지 않았더라도) 거짓 '임신' 결과가 나올 수 있습니다.
• 자궁과 임신, 난소 냉동, 폐경 및 매우 희귀한 일부 의학적 질환은 잘못된 결과를 제공할 수 있습니다.
• 결과가 '임신'이라든가 임신 초기에 발생할 수 있는 자연 유산으로 인해 나중에 임신이 아니라는 결과를 얻을 수 있습니다.
예상치 못한 결과가 나왔다면 담당 의사와 상담해야 합니다.
- 7** 임신 테스트기를 사용했는데 색 변화 팀이 완전히 분홍색으로 바뀌지 않았습니다. 어떻게 해야 합니까?
색 변화 팀이 완전히 분홍색으로 바뀌지 않으면 충분한 양의 소변을 묻히지 않았을 수 있습니다. 그러나 테스트 실시 후 10분 이내에 제어 창에 파란색 선이 나타나면 테스트기가 작동한 것입니다. 테스트 실시 후 10분 이내에 제어 창에 파란색 선이 나타나지 않으면 **8번 질문**을 참조하십시오.

- 8** 임신 테스트기를 사용했는데 제어 창에 파란색 선이 나타나지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?
테스트 실시 후 10분 이내에 제어 창에 파란색 선이 나타나지 않으면 테스트기가 작동하지 않은 것입니다. 그 이유는 다음과 같을 수 있습니다.
• 색 변화 팀이 계속 아래쪽으로 가리키도록 하지 않았거나 소변을 묻힌 후 테스트 스틱을 평평한 곳에 두지 않았기 때문.
• 너무 많거나 너무 적은 양의 소변을 묻혔기 때문. 5초간 샘플링해야 합니다.
새 테스트 스틱을 사용하여 지침을 따르도록 주의하면서 다시 테스트해야 합니다. 깨끗하고 건조한 용기에 소변 샘플을 채취하여 색 변화 팀을 5초만 담가도 됩니다.
- 9** 결과가 '임신스러우면 어떻게 해야 합니까?'
• 결과가 '임신'이라면 테스트 실시 10분 이내에 제어 창에 파란색 선이 나타나고, 결과 창에 플러스(+) 기호가 있어야 합니다. 결과 창에 나타난 플러스(+) 기호의 모양이 다를 수 있으나 플러스(+) 기호를 구성하는 선과 제어 창에 보이는 선의 폭은 비슷합니다(그림 A~C 참조).
그림 A
이것은 '임신'을 나타냅니다. 이는 사용자가 hCG 수치가 비교적 낮은 수 있는 생리 예정일 전에 테스트할 때 표시될 가능성이 더 높습니다.
그림 B
이는 사용자가 임신 중일 때 그리고 hCG 수치가 아직 비교적 낮은 생리 예정일이나 그 무렵에 테스트할 때 드물지 않게 나타납니다.
그림 C
이는 사용자가 임신 중일 때 그리고 hCG 수치가 보다 높은 생리 예정일로부터 수일 후에 테스트했을 때 나타날 가능성이 더 높습니다. 여전히 결과가 '임신스러우면 최소 3일간 기다렸다가 지침을 충실히 준수하여 다시 테스트해야 합니다.
• 결과가 '임신 아님'이라면 테스트 실시 10분 이내에 제어 창에 파란색 선이 나타나고, 결과 창에 마이너스(-) 기호가 있어야 합니다. 테스트 결과가 '임신 아님'이지만 여전히 임신이 의심되는 경우, **13번 질문**을 참조하십시오.
- 10** 무엇이 결과의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니까?
생리 예정일보다 일찍 테스트하는 경우 Clearblue® Plus의 정확도가 낮아집니다. 적절한 양의 소변 샘플을 채취하지 않은 경우 신뢰할 수 있는 결과를 얻지 못할 수 있습니다. 그러나 테스트 실시 후 10분 이내에 제어 창에 파란색 선이 나타나면 결과를 믿어도 됩니다. 예상치 못한 결과가 반복적으로 나오면 담당 의사와 상담해야 합니다. 또한 **8번 질문**을 참조하십시오.
- 11** 언제 결과를 확인할 수 있습니까?
'임신' 결과는 생리를 거른 날(생리가 예상되었으나 나오지 않은 다음 날)부터는 테스트 시 1분 만에 표시될 수 있습니다. 결과를 확인하기 전에 제어 창에 파란색 선이 있는지 확인하십시오. '임신 아님' 결과를 확인하기 위해 또는 생리 예정일 전에 테스트할 때는 3분간 기다려야 합니다. 파란색 선이 10분 이내에 제어 창에 나타나면 테스트기가 작동한 것입니다(**8번 질문** 참조).
- 12** 결과는 얼마나 오래 남아 있습니까?
결과에 테스트 후 3~10분 사이에 언제든지 확인할 수 있습니다. 10분 후에 일어나는 결과의 변화는 무시해야 합니다.
- 13** 테스트기에 '임신 아님' 이 표시되었습니다. 어떻게 해야 합니까?
임신이 아니거나 임신 호르몬의 수치가 결혼 가능할 정도로 충분히 낮지 않거나 사용자가 생리 예정일을 잘못 계산했을 수 있습니다.
• 테스트를 일찍 했다면 예상된 생리 기간에 다시 테스트하십시오.
• 생리 기간이 지났다면 일주일 후에 다시 테스트하십시오. 그 테스트에서 '임신 아님'이라는 결과가 나오면 이제 아직 생리가 없었던 담당 의사와 상담하십시오.
- 14** 테스트기에 '임신'이 표시되었습니다. 어떻게 해야 합니까?
테스트기에 '임신'이라고 표시되면 다음으로 어떤 조치를 취해야 할지 조언해 줄 수 있는 담당 의사와 상담해야 합니다.

www.clearblue.com

제품 문의 사항은 고객 지원 센터(아래 주소)로 문의하십시오.
✉ 제조업체: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD) 스위스, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland.
제조원: Alere (Shanghai) Diagnostics Co., Ltd.
151 Libing Rd & 3728 Jinke Rd, China (Shanghai)
Pilot Free Trade Zone, Shanghai 201203, P.R. China
Clearblue는 SPD의 상표입니다.
© 2019 SPD. All rights reserved.
수입자: 포워드메디칼(서울특별시 서구 법원로 114 A동 703호(문정동, 엠스데이트))
허가번호: 수허 17-440 호

임신 문제에 관한 다음 조치, 정보 및 일반 조언은 다음의 당사 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. www.clearblue.com

이 장치는 가정용입니다. 재사용하지 마십시오. 2~30°C에서 보관하십시오. 냉장 보관할 경우에는 테스트 전에 실온에 도달할 때까지 30분간 기다리십시오. 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 체외 진단용으로만 사용할 수 있습니다. 일반 가정 폐기물과 함께 폐기하십시오. 포일 포장지가 손상되었다면 사용하지 마십시오. 유효 기간이 경과한 테스트 스틱은 사용하지 마십시오.

본 제품은 의료가 아니며 체외진단용 시약임. 사용목적: 사람의 소변에서 hCG(human Chorionic Gonadotropin)를 면역코마포그라피법으로 정성하여 임신 여부를 확인하는데 도움을 주는 체외진단용 의료기기이다. 포장단위: Kit. 경고 및 주의사항: 사용설명서 참조. 사용 전에 사용자 주의사항을 반드시 확인하십시오. 본 제품은 일회용이며 재사용을 금함. 제품 감도: 25mIU/ml(hCG). 제조번호 및 사용기한: 영문 라벨 참조.